





LoopMaster[®] - Sochman Snare

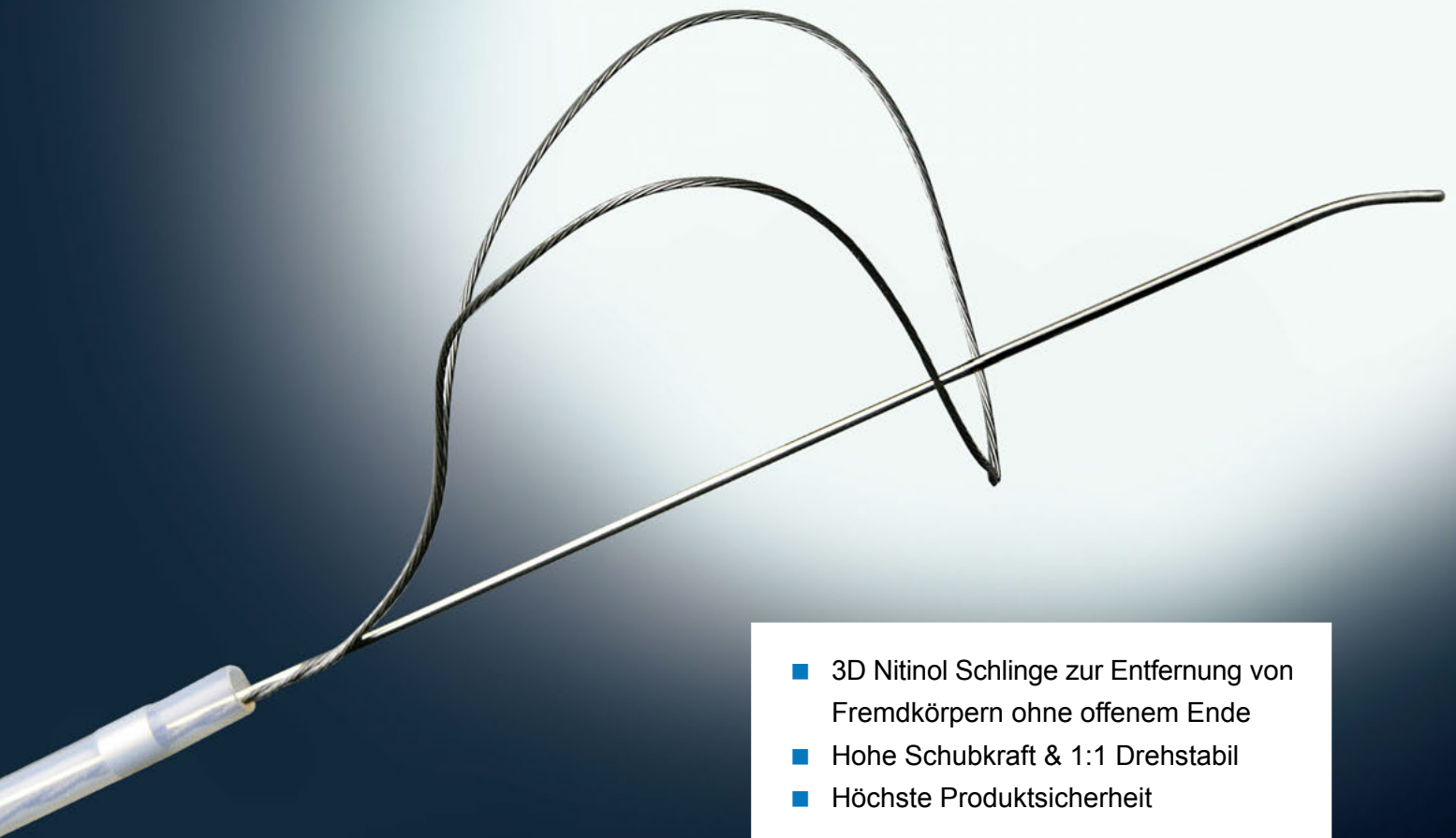

- 3D Nitinol Schlinge zur Entfernung von Fremdkörpern ohne offenem Ende
- Hohe Schubkraft & 1:1 Drehstabil
- Höchste Produktsicherheit

LoopMaster® - Sochman Snare

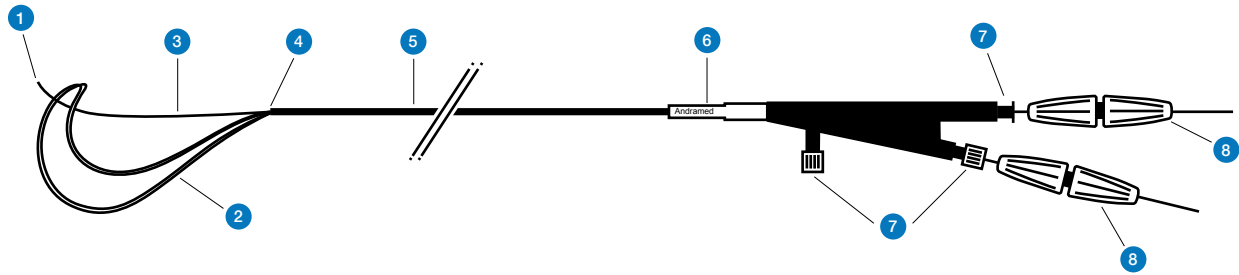


- 1 Atraumatisches distales Ende des Sicherungsdrahtes
- 2 Nitinol Schlinge
- 3 Sicherungsdraht
- 4 Röntgendichte Marker am distalen Katheterende
- 5 Flexibler Schaft
- 6 Knickschutzverstärkung
- 7 Luer Lock Anschluss
- 8 Großer Torquer zur einfachen Kontrolle der Fangschlinge und des Sicherungsdrahtes


Entfernung von Fremdkörpern



- 1 Die Schlinge wird um den zu entfernenden Fremdkörper gelegt.

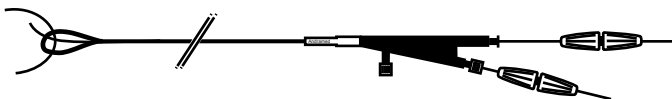

- 2 Durch das schließen der Schlinge wird der Fremdkörper zwischen Fangschlinge und Sicherungsdraht fixiert.

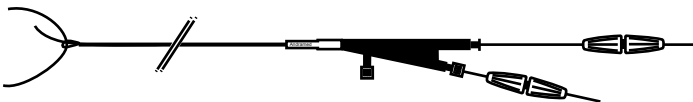

- 3 Vollständig fixiert ist es möglich den Fremdkörper sicher aus dem Körper zu entfernen.

Artikelkennung LoopMaster®

Artikelnummer	Ø Schlinge	Länge (cm) Schlinge/Führungsdraht	Länge (cm) Einführschleuse	Ø Einführschleuse (F)
ASL-25	25 mm	130/150	110	8

