

# PRODUKTE FÜR GEFÄSSINTERVENTIONEN ANDRA2BALLOON

## Hochwertiger perkutaner transluminaler Angioplastie-Katheter optimiert für die Stentdilataion

Der Andra2Balloon® wurde speziell für die Dilatation großvolumiger Gefäße entwickelt und bietet höchste Präzision und Sicherheit. Als non-compliant PTA-Katheter gewährleistet er eine kontrollierte Expansion und eine exakte Druckübertragung – ideal für anspruchsvolle interventionelle Eingriffe.

### Hauptmerkmale


- Optimierte Faltpaarkeit für besseres Rollen und einfaches Neupositionieren
- Koaxiales Schaftdesign für schnelles Inflation und Deflation
- Optimierter PTA-Ballon für die Stentdilataion
- 2 Pt/Ir-Röntgenmarker am Innenschaft
- Nicht nachgiebiger Ballon aus PA für hohen Druck

### Technische Spezifikationen

KATHETERLÄNGE	100 CM
EMPFOHLENE HÜLLE	7F - 14F
BALLONDURCHMESSER	10MM - 32MM
BALLONLÄNGE	20MM - 60MM
FÜHRUNGSDRAHT MAX.	0,035" (0,89MM)



# PRODUKTE FÜR GEFÄSSINTERVENTIONEN ANDRA2BALLOON

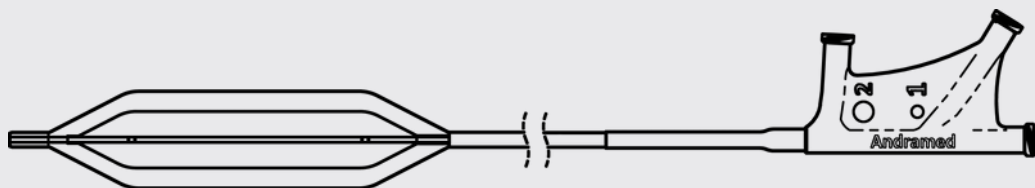

## Bestell-Codes

Bestellcodes	Innenballon Ø/Länge in mm	Äußerer Ballon Ø/Länge in mm	Nenndruck in kPa (bar)	Nennberstdruck in kPa (bar)	Einführschleuse Ø in Fr
A2B 20/40-1000 A2B 20/60-1000	10/40 10/60	20/40 20/60	400 (4)	700 (7)	11
A2B 22/40-1000 A2B 22/60-1000	10/40 10/60	22/40 22/60	400 (4)	700 (7)	12
A2B 24/40-1000 A2B 24/60-1000	14/40 14/60	24/40 24/60	400 (4)	700 (7)	13
A2B 26/40-1000 A2B 26/60-1000	14/40 14/60	26/40 26/60	400 (4)	700 (7)	14
A2B 28/40-1000 A2B 28/60-1000	14/40 14/60	28/40 28/60	400 (4)	700 (7)	14
A2B 30/40-1000 A2B 30/60-1000	14/40 14/60	30/40 30/60	400 (4)	600 (6)	14
A2B 32/40-1000 A2B 32/60-1000	14/40 14/60	32/40 32/60	400 (4)	600 (6)	14

## Kontakt

Angiopro GmbH  
Heydenreichstraße 5  
67346 Speyer  
Germany

www.angiopro.de  
E-Mail: kontakt@angiopro.de  
Phone: 06232 291691 - Fax: 06232 291693

